

重度障害者用意思伝達装置



お試しできます

miyasuku EyeConSW (EyeConSW-N・EyeConSW-TB)

(ユニコーン)



- 重度障害者用意思伝達装置とは、発話による意思の伝達や筆談等で意思を伝達することの難しい方が、スイッチや視線による操作で意思を伝えるための装置です。
- 文章入力、読み上げ、メール、環境制御等の豊富な機能で意思伝達をスムーズに行うことができます。
- 利用される方にあわせていろいろなスイッチ、視線入力装置を組み合わせ、操作画面も自由にカスタマイズできます。病状の変化に応じて幅広く対応できますので、利用者及びご家族のQOL(生活の質)向上が期待できます。

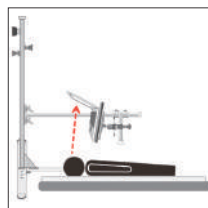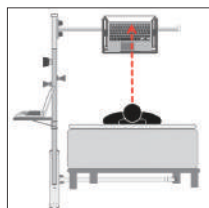

非課税
504,000円

「eeyes」 (イイアイズ)

(オレンジアーチ)



- 神経性の難病によりコミュニケーションが困難となった方をサポートする福祉機器です。指先や目の動きなど極わずかな身体の動きを捉え、伝えたい言葉の作成や発声に加え、赤外線学習リモコンによる家電の操作や、インターネットを使った生活品質の向上等、ユーザ様の日々の生活を優しくご支援致します。
- イイアイズに環境制御装置やスマートスピーカーを組み合わせ、ベッドや照明をコントロールしたり、専用の分岐装置を組み合わせ、ご家族や介護の方を呼び呼び鈴を鳴らすなど、市販の各種の機器を組み合わせる事により、イイアイズの活用の幅が大きく広がります。

非課税
509,400円

視線入力装置 トビーPCEye 5

- WindowsPCのディスプレイに取り付けるだけで視線入力が可能で、付属の専用ソフトで殆どのマウス操作が簡単にできるようになります。



220,000円(税別)

ピエゾニューマティックセンサスイッチ PPSスイッチ

(パシフィックサプライ)

- ALSをはじめとする難病患者のことを考えて設計された入力装置(スイッチ)。
- 圧電素子(ピエゾ)と空圧(ニューマティック)の2種類のセンサを選択することが出来るスイッチです。【ピエゾ】「ひずみ」や「ゆがみ」を感知することにより信号出力を行うセンサ。直径17mmのセンサ部を身体の任意箇所に医療用テープで貼り付けて使用します。【ニューマティック】センサ部のエアバッグに触れることで反応するセンサです。僅かな力で操作可能です。



【表示モニター】



【ピエゾセンサの使用例】

- 表情や指のわずかな動きで使用しています。



【エアバックセンサの使用例】

- 指のわずかな動きで使用しています。

- 横幅7.7×縦幅17.8×厚さ4.2cm
- 重量：約200g(電池含まず)
- 電源：AC100Vまたは単3乾電池4本

42,700円(税別)

操作支援スイッチ/オスッチN

(トクソー技研)



- 各種スイッチを接続し入力を行うと先端のレバーが動きます。
- 押しボタン式のスイッチ操作ができます。
- 残存機能を使用したスイッチ(別売)を使用し各種機器のスイッチ操作を行えます。

- 幅18.5×長さ23×高さ7.5cm
- 重量：350g

24,000円(税別)

操作支援スイッチ/ホッパタッチスイッチ

(トクソー技研)



- 先端に触れてバネをわずかに曲げるだけのシンプル操作。手足以外に木杓や唇、眉などわずかに動く部分で操作可能。
- 先端スイッチ部を頬の近くに位置決めし、ベッドサイドレール等にクリップ部で固定してご使用ください。
- 電源が不要ですので、車イスや移動先でも使えます。

- 重量：400g

12,000円(税別)